



# FINECARE VET

## Características do produto

Sistema de controle de temperatura integrado

Tela ampla e touch screen

Conexão: Sistema Linux, HIS e LIS

## Parâmetros técnicos

Tipo de amostra: Soro, plasma ou sangue total

Velocidade do teste: 20 amostras por hora



Tamanho: 270 x 238 x 146 mm

Peso: 2,8 kg

Estabilidade: CV < 10%

Conexões: RS232, USB e Ethernet


## Operação

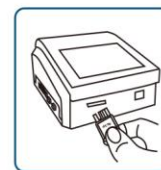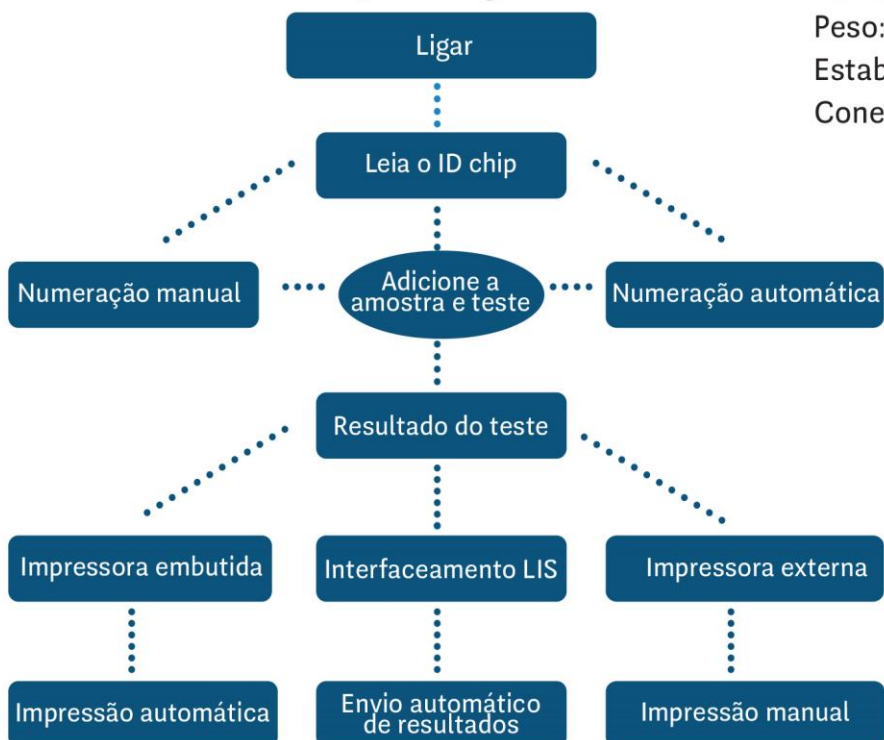


Carregue o ID Chip



Adicione a amostra ao card de teste

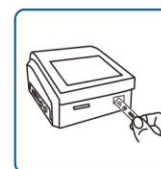

Insira o card no equipamento

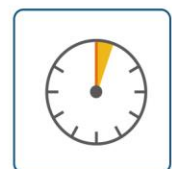

Leia o resultado (3-15 minutos)



Controle de software inteligente e confiável

## Plataforma de testes de imunofluorescência

| Item                                          | Volume de amostra                  | Tempo de reação | Linearidade                       | Valores de referência                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| T4                                            | 75µL                               | 15min           | 8~100nmol/L<br>(0.62~7.77µg/dL)   | Canino 15~60nmol/L (1.2~4.7µg/dL)<br>Felino 15~50nmol/L (1.2~3.9µg/dL) |
| TSH                                           | 75µL                               | 15min           | 0.1~100mIU/L<br>(0.005~2.56µg/dL) | Canino 0~37mIU/L (0~0.68ng/mL)<br>Felino 0~21mIU/L (0~0.32ng/mL)       |
| Progesterona Canina<br>(cProg)                | 75µL                               | 15min           | 1~50ng/mL<br>(3.18~159nmol/L)     | 10~20ng/mL (31.8~63.6nmol/L)                                           |
| Cortisol<br>(COR)                             | 75µL                               | 15min           | 10~1000nmol/L<br>(0.36~36µg/dL)   | 16.6~166nmol/L (0.6~6.01µg/dL)                                         |
| D-Dímero                                      | Sangue total 15 uL<br>Plasma 10 uL | 5min            | 100~10000ng/mL                    | <250ng/mL                                                              |
| HbA1C<br>(Hemoglobina Glicada)                | Sangue total 10 uL                 | 5min            | 3%~14.5%                          | 3%~4.5%                                                                |
| PCR Canina<br>(cCRP)                          | 10µL                               | 3min            | 2~250mg/L                         | <10mg/L                                                                |
| Soro Amilóide Felino<br>(fSAA)                | 10µL                               | 3min            | 2~300mg/L (µg/mL)                 | <8mg/L (µg/mL)                                                         |
| cPL<br>(Lipase Pancreática Específica Canina) | 75µL                               | 15min           | 50~2000µg/L                       | <200µg/L                                                               |
| fPL<br>(Lipase Pancreática Específica Felina) | 75µL                               | 15min           | 0.5~50µg/L                        | <3.5µg/L                                                               |

Tipo de amostra: Sangue Total/ Soro/ Plasma, porém para HbA1C apenas Sangue Total e D-dímero apenas Sangue Total (15uL) ou Plasma (10 uL).  
 Armazene de 4 - 30°C. NÃO congele.



**MARCELO T. SHIGUEMATSU**  
**DÉBORA P. SHIGUEMATSU**  
 DIRETORES DE SOLUÇÕES



067 9 9916.6315  
 067 9 9604.6314



comercial@laborloja.com.br  
 www.laborloja.com.br



R. Antônio Correia, 245 Sala 04  
 Jd. Monte Líbano, CG | MS, 79.004-460