

ECO M10

Plataforma *Point of Care*
para Biología Molecular



Simples



Resultados precisos



Rápido



ECO M10

Plataforma versátil e escalonável para Biologia Molecular

AMPLIFICAÇÃO ISOTÉRMICA + PCR EM TEMPO REAL

Em uma única plataforma

**CONFIGURAÇÃO ESCALONÁVEL ATÉ 8 MÓDULOS
ADEQUADO PARA TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE**



Interface intuitiva




Sistema operacional alternativo para
PC (Windows) ou tablet (Android)



Conectividade LIS/HIS



Requisitos de manutenção
minimizados

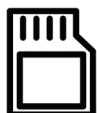

Memória de até 5.000 resultados com
valor de Ct e curvas de amplificação



Indicador de status intuitivo



Tela *touch screen* 10.1"



Econômico



Configurações customizáveis
até 8 módulos



eco
DIAGNÓSTICA

 **SD BIOSENSOR**

Procedimento fácil para uma melhor performance



1. Escaneie a amostra



2. Escaneie o cartucho



3. Aplique a amostra e feche o cartucho




4. Insira o cartucho no analisador. O teste começa imediatamente.

Exemplo de resultado

Summary	Amplification	Details
Test Information		
Assay Name	SARS-CoV-2	
Patient ID		
Sample ID	LSH TEST	
Test Type	Specimen	
Run Started	2021/6/14 10:48:49	
Run ended	2021/6/14 11:45:55	
User	admin	
Result		Valid
ORF1ab		0.69
E		0.69
IC		28.87

Sumário

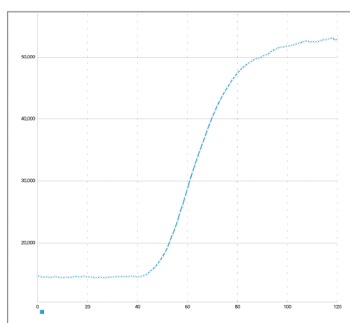

Curva de amplificação

Details	
Operator ID	Labuser1
Cartridge S/N	1322906486346
Cartridge Expiration Date	2020/04/12
Module S/N	2342853463462
Test Status	Completed
Error Code	-
Test Start Date and Time	2019/09/01 13:15
Test End Date and Time	2019/09/01 14:15
Test Execution Time	30 min 10sec
Assay Name	Assay AB
Test ID	234233
Test Result	Positive
Detected Pathogen	Inf A, Inf B
Undetected Pathogen	Ebola/MERS/Adipax epico

Detalhes

Especificações

Descrição

Energia
Condições de operação
Método
Sistema de operação
Escalonamento
Memória
Interface
LIS/HIS
Tamanho
Peso

Detalhes

20-264Vac(50-60Hz)
Temperatura 15-35°C (59-95°F) Umidade 20-80%
LAMP e PCR em tempo real
Console, Desktop (Windows), Tablet (Android)
Até 8 módulos em console ou tablet - Até 16 módulos com Desktop
5,000
LAN, USB (x4)
LAW
M10 Console: 18x23x41 cm - M10: 14x33x32 cm
M10 Console: 4kg - M10: 7.5 kg

ECO M10


Laboratório em um cartucho

Cartucho completo - Extração de ácido nucleico + amplificação


Ensaio Multiplex com até 12 alvos



Sistema de Extração

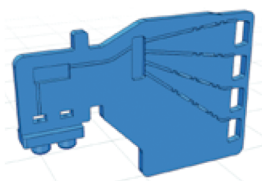

Amplificação: 4 poços

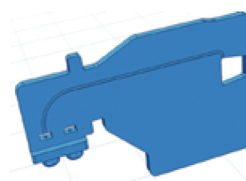

Amplificação: 1 poço



- ✓ Resultados confiáveis
- ✓ Resultados em 30 minutos
Extração + amplificação
- ✓ Preparação em 1 minuto
- ✓ Multiplex utilizando canais FAM/HEX/Cy5
- ✓ Armazenamento em temperatura ambiente

Menu de testes



Resultados de 30-60 minutos

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

- SARS-CoV-2 (RT-PCR)
ORF1ab/Gene E
- SARS-CoV-2 (LAMP)
ORF1ab / Gene N
- SARS-CoV-2/Flu A/Flu B/RSV (RT-PCR)
ORF1ab, N / Gene M (Flu A) / Gene NS1 (Flu B) /
Gene M (RSV)

DOENÇAS INFECCIOSAS

- MPX-OPX (Monkeypox / Orthopoxvirus)
- Clostridium difficile (CD)
- HPV
HPV-16, HPV-18, Alto risco

ARBOVÍRUS

- DENV 1-4/ZIKV/CHIKV/YFV/WNV
- DENV 1-4

TUBERCULOSE

- MDR-TB RT-PCR
TB (IS6110, IS1081), RIF (*rpoB*), INH (*katG*, *inhA*)
- MTB/NTB

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

- CT/NG/MG/UU/TV/MH/HSV1/HSV2

PCR EM TEMPO REAL - QUANTIFICAÇÃO DA CARGA VIRAL

- HIV-1
- HBV
- HCV

